

# ÖZELLİKLER

<b>Model</b>	SK-X9
<b>Ölçüm Teknoloji</b>	Multiband Biyolojik Resistans
<b>Elektrik Kutbu</b>	8 Elektrod
<b>Ölçüm Frekansı</b>	20 KHz, 100 KHz
<b>Ölçüm Bölgesi</b>	Sağ El, Sol El, Sağ Bacak, Sol Bacak

## Fonksiyon Parametreleri

<b>İşletim Sistemi</b>	Android
<b>Veri Depolama</b>	120.000 Rapor
<b>Ekran</b>	10.1" Renkli Multit-Touch Dokunmatik Ekran
<b>Giriş Methodu</b>	İkinci Nesil ID Kart, Kod Okuyucu
<b>Yazdırma Methodu</b>	Termal Yazıcı, Harici A4 Yazıcı Desteği
<b>Açılış Süresi</b>	< 30 sn
<b>Ses Fonksiyonu</b>	Sesli Yönlendirme
<b>Ağırlık Ölçümü</b>	1 - 200 kg
<b>Yaş Ölçümü</b>	3 - 99 Yaş
<b>Ölçüm Methodu</b>	Bağımsız Ölçüm


## Ek Özellikler

<b>Güç Kaynağı</b>	100-240 V; 50/60 Hz
<b>Ürün Ağırlığı</b>	48 kg
<b>Ürün Boyutu</b>	62.5 x 40.5 x 234.5 cm
<b>Harici Arayüz</b>	RJ45, USB
<b>Çalışma Ortamı</b>	5 - 40 °C, 15-93% (Nem)
<b>Depolama Ortamı</b>	-25 - 70°C, <93% (Nem)



# VÜCUT ANALİZ CİHAZI

## SK-X9

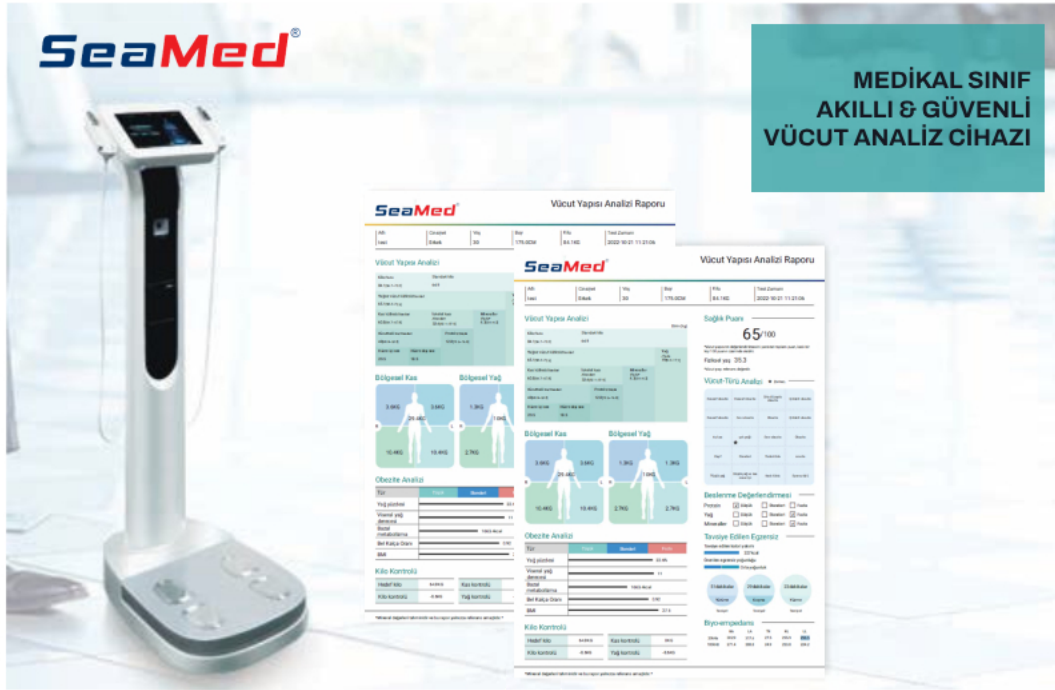

**MEDİKAL SINIF  
AKILLI & GÜVENLİ  
VÜCUT ANALİZ CİHAZI**



Yükseklik



Ağırlık



Yağsız Ağırlık



Vücut Nemi



Kemik Kütlesi



Vücut Yağ Kütlesi



BMI



Vücut Yağ Oranı



Kalça-Bel Oranı



Visseral Yağ Sınıfı



Bazal Metabolik



Segmental Kas Kütlesi



Segmental Yağ Kütlesi



Kas Yağ Kontrolü



Vücut Yaşı



Sağlık Skoru



**Senkronize Entegre Ölçüm ile Hassas ve Güvenilir**

Ağırlık ve vücut kompozisyonu senkronize olarak ölçülür, Otomatik toplanan uzunluk verisi manuel veri girişi gerektirmez



**Akıllı Koruma ile Güvenli**

Medikal sınıf EMC (YY0505-2012) sertifikası, güvenli Optoküler elektrik izolasyonu



**BIA Vücut Kompozisyon Ölçüm Methodu**

Çoklu-Yumru, Çoklu-Frekans beşeri empedans ölçüm methodu, %1 hata payı



**Akıllı Bağlantı ile Erişilebilir**

Çeşitli giriş methodlarını destekler; ID Kart, QR Kod, Otomatik Veri Aktarımı Ethernet Desteği / WiFi / Bluetooth